


## ACCUNIQ BP500 제품사양

모델명	ACCUNIQ BP500
측정방법	오실로메트릭
표시방법	Custom Mono LCD디스플레이
측정범위	압력 0~300mmHg, 맥박 30~240bpm
정밀도	압력 ±2mmHg, 맥박 ±1.5%이내
커프형식	이중커프방식
최소눈금단위	1mmHg
가압방법	완전 자동가압
배기방법	마이크로 컨트롤에 의한 전자배기방식
전원	입력 AC 100~240V, 50/60Hz   출력 DC 12V, 5A 아답터
작동범위	온도 10~40℃, 습도 30~75%(non condensing)
보관범위	온도 -10~60℃, 습도 95% 미만(non condensing)
크기	450(W)×502.4(D)×278.7(H)mm (±10mm)
장비중량	약 4.8kg
프린터	써멀프린터
결과항목	최고혈압, 최저혈압, 평균혈압, 맥박, 맥압, 맥파패턴 후면모니터(옵션) 최고혈압, 최저혈압, 맥박, ID번호, BMI

※ 외관과 사양은 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품은 의료진단기기입니다. '사용 시 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

※ 가용 횟수가 많거나, 사용 횟수가 많지 않더라도 구입 후 3년이 지난 제품은 2년에 한 번씩 캘리브레이션 받기를 권장합니다.

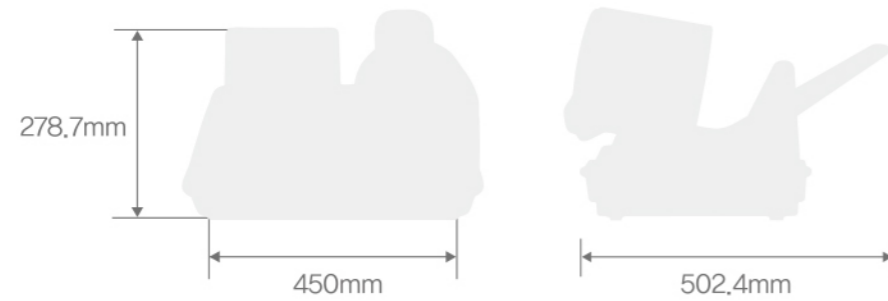

셀바스헬스케어가 획득한 국제인증 마크, 특허 및 수상내역



셀바스헬스케어는 자원메디칼의 새로운 사명입니다.

본사 대전광역시 유성구 신성로 155 | TEL 042-879-3000 | FAX 042-864-4462

서울지점 서울시금천구가산디지털1로 19 대륭테크노타운 18차 20층 | TEL 02-587-4056 | FAX 02-588-1937

Copyright © SELVAS Healthcare, Inc. All Rights Reserved | 2019.02.25. REV A.0

ACCUNIQ (아큐닉)

# BP500

www.accunIQ.com



# BP500

Automatic Blood Pressure Monitor

BP500은 가볍고 견고한 디자인, 맞춤형 가압 및 배기 2단계 측정으로 높은 정확도 구현

- 5kg이내의 무게로 가벼우면서 견고함
- 간결하고, 세련된 디자인
- 측정 중에 올바른 자세유도 및 안정감을 느낄 수 있도록 함
- 측정 중 팔의 움직임 감지로 측정 오류를 제거
- 팔이 얇거나 맥이 약해도 모두 측정 가능함
- 가압 단계에서 1차로 피측정자의 혈압 상태를 판단하고, 배기 단계에서 2차 측정을 하게 한 2단계의 높은 정확도
- 선명한 LCD를 채택으로 시인성이 우수
- 당사 모든 BCA 제품과 호환
- 알레르기에 민감한 피측정자를 위한 Latex Free 제품

+ 사용자의 요구에 맞춘 다양한 옵션



써멀프린터



후면모니터



의자



전용카트



- 01 LED 디스플레이 화면
- 02 긴급정지 버튼
- 03 시작, 정지 버튼
- 04 고속프린터
- 05 컵부
- 06 팔받침대



+ 다양한 출력지

2019.01.10 13:17	
최고혈압	120 mmHg
최저혈압	71 mmHg
맥박수	86 bpm
ACCUNIQ	

• 심플모드A

2019.01.10 13:17	
최고혈압	120 mmHg
최저혈압	71 mmHg
맥박수	86 bpm
심부담도	10320
ACCUNIQ	

• 심플모드B

2019.01.10 13:17	
최고혈압	120 mmHg
최저혈압	71 mmHg
평균혈압	87 mmHg
맥박수	86 bpm
맥압	49 mmHg
심부담도	10320
ACCUNIQ	

• 일반모드

